


ビデオ・トラッキング・ソフトウェア



ANY-maze™ Ver.5

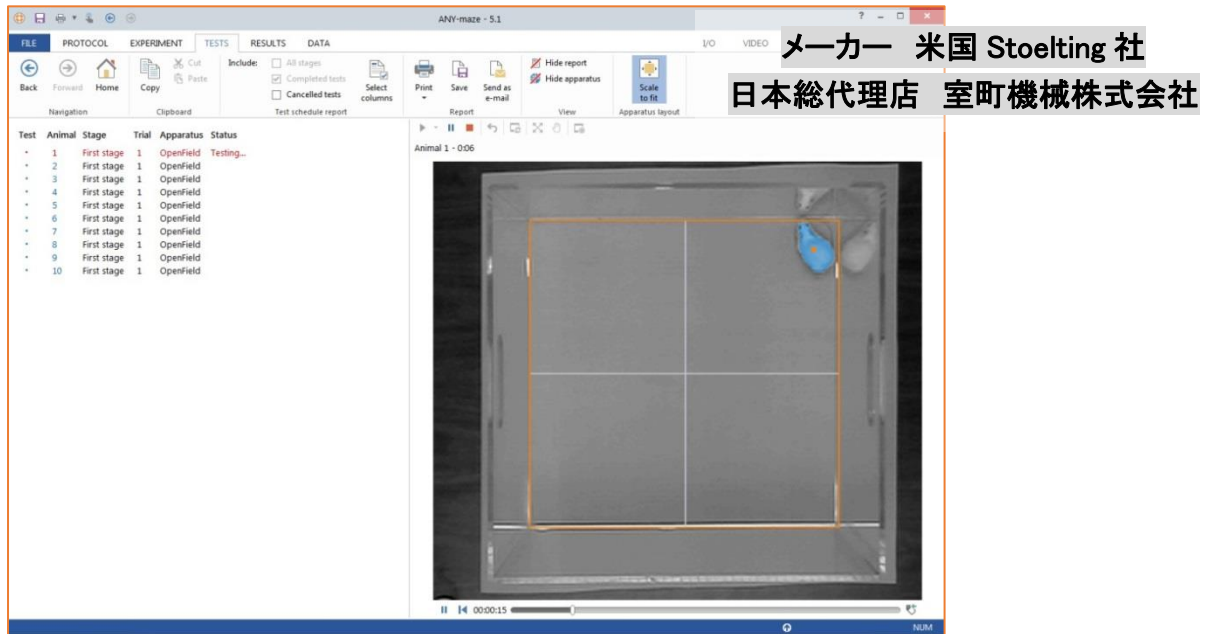

ビデオ・トラッキング・ソフトウェア ANY-maze は Ver.5 となり、使いやすさとトラッキング精度に重点を置いたソフトへと進化しました。

・探しづらかった機能を探しやすく！


従来の ANY-maze は設定を行いたくても、設定項目が Protocol の階層の下に存在していたり、項目自体がみつからなかったりという事がありました。

そこで、Protocol の構成を見直し、よく使う機能を独立させ探しやすくしました。

また、“リボン”を搭載し、細かな設定については“リボン”を探せば設定できるようなデザインになりました。

リボン

Protocol は一部機能を独立させて目的の機能を探しやすくなりました。

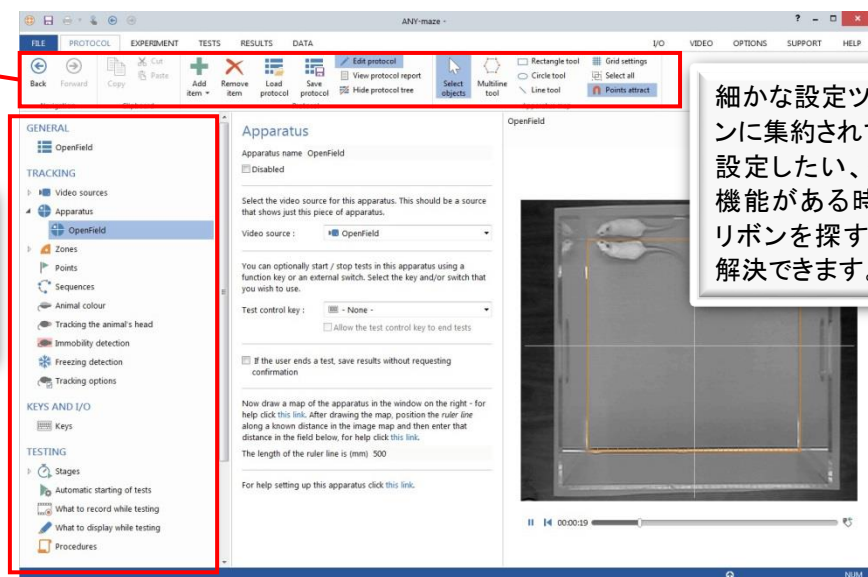


細かな設定ツールはリボンに集約されています。設定したい、使用したい機能がある時は、まず、リボンを探することでほぼ解決できます。

・”Procedures”機能により複雑な実験も可能に！

従来の ANY-maze では”Events and Actions”機能から、より複雑な実験スケジュールでも対応できるように”Procedures”機能に進化しました。

ツールを使ってプログラムを組む様なイメージでスケジュールや実験内容の設定を行う事ができます。

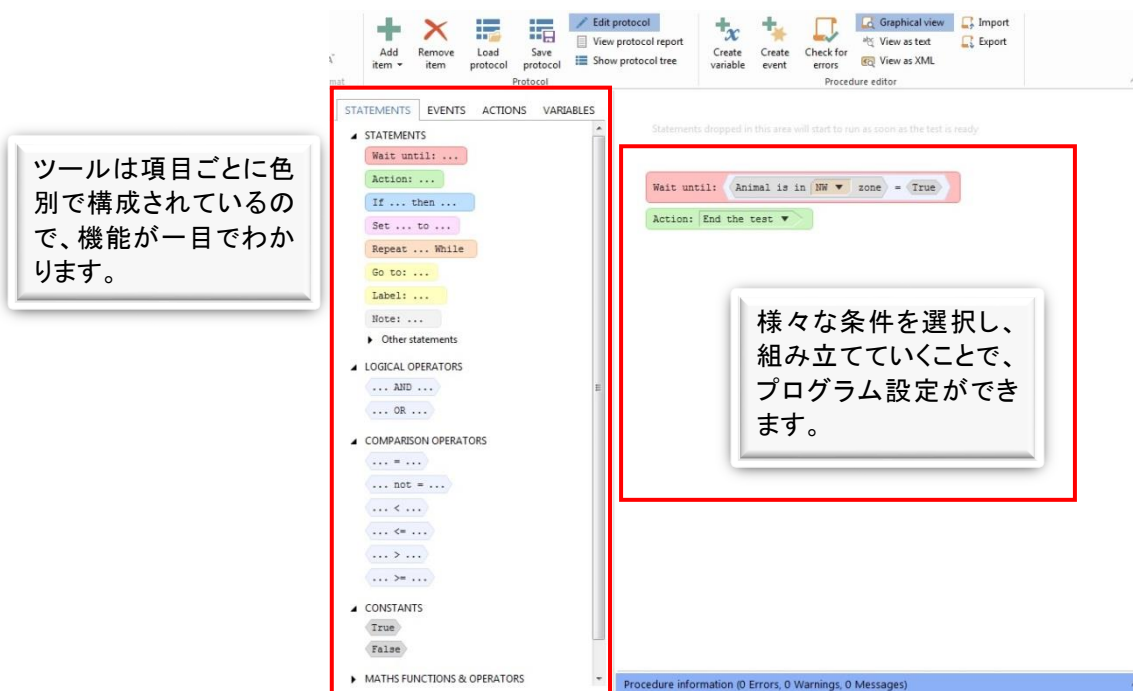

ツールは項目ごとに色別で構成されているので、機能が一目わかります。

様々な条件を選択し、組み立てていくことで、プログラム設定ができます。

他にも下記の変更点があります。(一例)

- ・バックアップ機能を搭載し、誤って上書きしたファイルでも復元できるようになりました。
- ・HiDPI 表示に対応しました。
- ・PC の解像度より大きい動画ファイルにも対応できるようになりました。
- ・実験ファイルの容量が従来の 50%程度に圧縮されました。
- ・温度センサ、アナログ出力、シリンジポンプなど幅広い外部入出力機器に対応しました。(入出力ボックスが別途必要)
- ・複数チャンネルを同時に実験する場合、同時スタートや各チャンネルの画面表示の入れ替えができるようになりました。
- ・ヒートマップ表示で色から滞在時間を判別できるようになりました。

旧バージョンの ANY-maze ファイルや Protocol ファイルからの引き継ぎが可能ですので、保存されているデータも簡単に移行できます。

ANY-maze をご購入いただいてから 1 年未満のユーザーはバージョンアップが無料で行えます。ご購入から 1 年以上の方は 1 年間の延長サポートを購入いただけましたらバージョンアップが可能です。
*バージョンアップをご希望の方は sales@muromachi.com へお問い合わせください。

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

メーカー: 米国 Stoelting 社

日本総代理店: 室町機械株式会社

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

販売代理店

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL: 03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL: 06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL: 092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: http://www.muromachi.com/