

触覚試験用プラットフォーム

NMM-PT




本製品は、触覚試験用機器の【ダイナミックプランタエステシオメータ】、【タックタイルテスト 20 ピースキット】、【エレクトロニックボンフライ】等で使用できる専用プラットフォームです。

従来は金属製の測定用メッシュであった為、動物の四肢に冷たさが伝わってしまう状況下で実験が行われていました。本製品は、樹脂製の測定用メッシュを採用しており、金属製のように冷たさを動物に与えず、実験を行うことができます。樹脂製メッシュは、動物に噛み切られることがありますが、簡単に張り替えることができます。

また、プラットフォームの高さは任意で調整がすることができ、さらに、収納しやすいよう分解することもできる仕様となっております。

外形寸法	W310mm×D560×H550mm
1ユニットの網面露出面積	190mm×180mm（上記1台で2ユニットの網を搭載）
網面高さ調整可能範囲	50mm~500mm
全体重量	3.75kg

※別売で、本プラットフォーム用アニマルケージもございます。

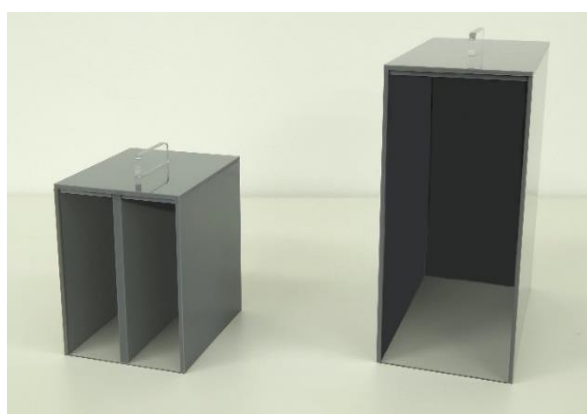

マウス用ケージ	
外形寸法	W120mm×D100mm×H140mm
材質	アクリル
ch 数	1 ケージ 2ch

ラット用ケージ	
外形寸法	W190mm×D100mm×H200mm
材質	アクリル
ch 数	1 ケージ 1ch

外見及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

※特注仕様のお見積りも承ります。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店