


(6) 実体顕微鏡用

実体顕微鏡に最適

スピーディな動き。そして、取付も簡単に。実体顕微鏡にぴったりな動きをしています。

MODEL SJ-1 手動ジョイスティックタイプ 定価 ¥110,000.-

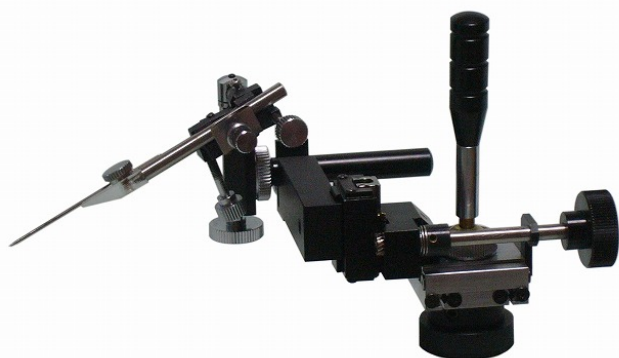

今までにない実体顕微鏡専用器

40倍前後の実体顕微鏡下での仕事はマニピュレータでは細かすぎ、手動では粗すぎて能率が悪いという問題を解決した実体顕微鏡用のマニピュレータです。取付金具の向きを変える事で、左右の切り替えも可能になっています。

| 仕 様 | |
|-------|--------------------------------------|
| 付 属 品 | ユニバーサルジョイント(U-1)・ピペットホルダ(K-4) |
| 駆動距離 | [粗動]Z 15mm ジョイスティック(X-Y平面最大駆動距離)15mm |
| 外形寸法 | W65 x D79 x H90 mm |
| 重 量 | 0.185 kg |

(7) サブマニピュレータ

安定したマニピュレータがワンコインの大きさで

MODEL SF-1 三次元小型 (一軸微動) 定価 ¥80,000.-

小型でもにぎりやすいハンドル

ハンドルの位置がすべて同列になっているので、スリム設計でマルチセッティングが可能です。X軸には微動も付いております。手のひらサイズのマニピュレータなので、サブマニピュレータとしてお使いになれます。



| 仕 様 | |
|-------|----------------------------------|
| 付 属 品 | ボールジョイント(B-2)・ピペットホルダ(K-4S) |
| 駆動距離 | [微動]X 5 mm [粗動]X 10 mm Y/Z 15 mm |
| 外形寸法 | W60 x D20 x H45 mm |
| 重 量 | 0.07 kg |

MODEL SC-1 三次元小型 定価 ¥60,000.-



ハンドル位置・大きさに注目

ハンドルの位置がすべて同列になっているので、スリム設計でマルチセッティングが可能です。手のひらサイズのマニピュレータなので、サブマニピュレータとしてお使いになれます。小さくても、安定し、操作し易いマニピュレータです。

| 仕 様 | |
|-------|-----------------------------|
| 付 属 品 | ボールジョイント(B-2)・ピペットホルダ(K-4S) |
| 駆動距離 | [粗動]X/Y/Z 15 mm |
| 外形寸法 | W50 x D20 x H45 mm |
| 重 量 | 0.065 kg |

MODEL SF-2 一次元粗微動小型(首振り・おじぎ) 定価 ¥50,000.-



コインサイズのマニピュレータなので、サブマニピュレータとしてお使いになれます。小さくても粗微動付いています。スリム設計でマルチセッティング可能です。

首振り・おじぎ機能がついているので、簡易ですが Y 軸・Z 軸調整もできます。

| 仕 様 | |
|-------|-----------------------------|
| 付 属 品 | ボールジョイント(B-2)・ピペットホルダ(K-4S) |
| 駆動距離 | [微動]5 mm[粗動]10 mm |
| 外形寸法 | W50 x D30 x H45 mm |
| 重 量 | 0.048 kg |

MODEL SC-2 一次元小型(首振り・おじぎ) 定価 ¥30,000.-

簡易三軸マニピュレータに

コインサイズのマニピュレータなので、サブマニピュレータとしてお使いになれます。粗動のみのシンプルタイプです。首振り・おじぎ機能がついているので、簡易ですが三次元マニピュレータとして活用できます。スリム設計でマルチセッティングが可能です。



| 仕 様 | |
|-------|-----------------------------|
| 付 属 品 | ボールジョイント(B-2)・ピペットホルダ(K-4S) |
| 駆動距離 | [粗動]X 15 mm |
| 外形寸法 | W40 x D30 x H45 mm |
| 重 量 | 0.043 kg |

マニピ 三次元手動 (一軸微動付) 定価 ¥74,000.-

マニスケ 三次元手動 定価 ¥65,000.-



- ・ 形は小さく・ハンドルは大きく
- ・ セットに必要なスペースを節約
- ・ ワンスライダー方式の粗微動メカ
- ・ ロングワーキング(各 30mm)
- ・ 左右兼用型



マニピから微動を除いたタイプ

| 仕 様 | |
|------|---|
| 付属品 | ボールジョイント(B-1)・ピペットホルダ(K-4) |
| 駆動距離 | [微動]X 5mm ハンドル回転 500μm [粗動]X 25mm Y/Z 各 30mm |
| 外形寸法 | W105 x D35 x H110 mm |
| 重 量 | 0.235 kg |

| 仕 様 | |
|------|----------------------------|
| 付属品 | ボールジョイント(B-1)・ピペットホルダ(K-4) |
| 駆動距離 | [粗動]X/Y/Z 各 30mm |
| 外形寸法 | W95 x D35 x H110 mm |
| 重 量 | 0.22 kg |