


実験動物摂食量測定システム

MFI-01

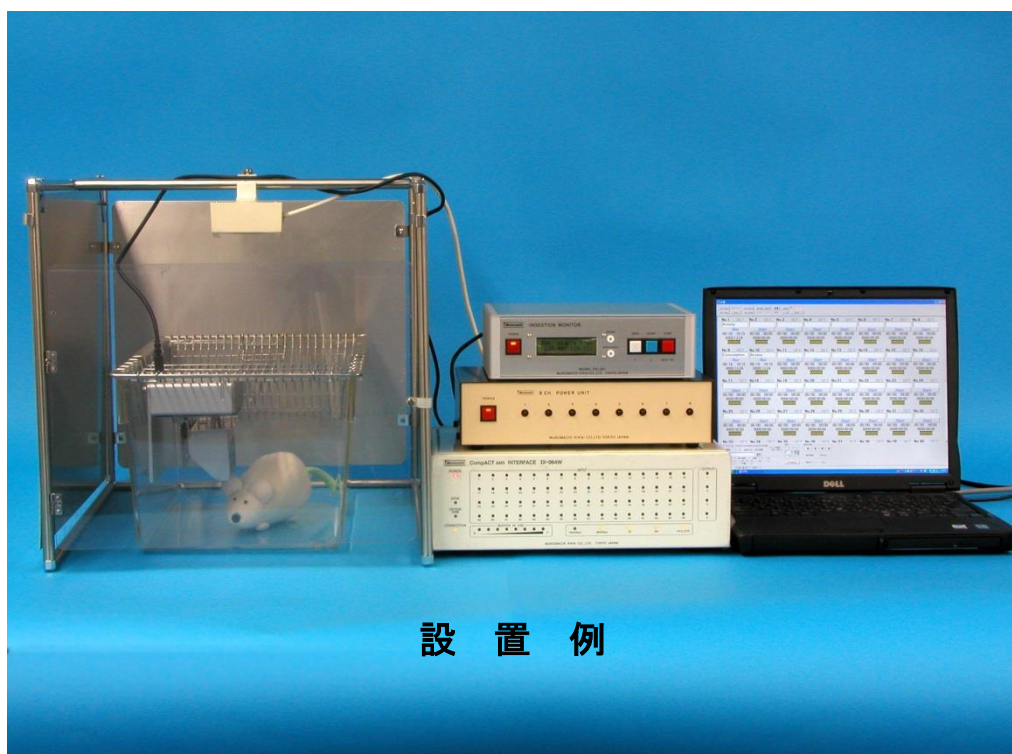

設置例

自発運動量測定システム スーパーメックスと併用

概要

本装置はマウス、ラットの摂食量、摂食時間を測定するために開発されました。市販の飼育ケージに簡単に取り付ける事ができるので、省スペースで多チャンネルの設置が可能であり、センサ FIS-001(ロードセル)で計測したデータ(重量変化)はモニタ FIC-001 及び、データ集録用インターフェース DI シリーズを介して、データ集録プログラム CompACT AMS Ver.3 に取り込む事ができます。

また自発運動量測定システム スーパーメックス、レアリング・センサ、ドリンキング・センサ等との併用により総合的なモニタリングが可能です。

(ソフト、スーパーメックスの詳細については、別カタログをご参照下さい)

システム構成
摂食量測定装置 MFI-01
データ集録用インターフェース DI シリーズ
データ集録プログラム CompACT AMS Ver.3
測定用飼育ケージ

摂食量測定装置 MFI-01 は、センサ FIS-001 とモニタ FIC-001 で構成されます。



センサ FIS-001



モニタ FIC-001

仕 様		
	センサ部	モニタ
測定項目	摂食量（分解能 0.1g）、摂食時間（1sec 単位）	
対応餌	固形飼料、粉餌	
寸 法	W100×D105×H110(mm)	W230×D180×H75(mm)
重 量	約 400 g	約 1.5 kg

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: <https://www.muromachi.com/>

販売代理店