

MODEL MK-V100

SMALL ANIMAL VENTILATOR

小動物用ベンチレータ



概 要

本装置はマウス、ラット、ウサギ等の小動物用従量式人工呼吸器で、コントロールユニット(MK-V100/C)とバルブユニット(ラット用 MK-V100/R、マウス用 MK-V100/M、またはウサギ用 MK-V100/RB)により 構成されます。

本装置コントローラをお持ちであれば、バルブユニットを交換する事により、ラットまたはマウス、ウサギと使い分ける事が出来、新たに高価なベンチレータを購入する必要がありません。

オプションのアドオンユニットと、必要数のバルブユニットがあれば、最大 5 匹まで制御する事が可能です。

稼動しながら簡単に吸気、呼気の比率、呼吸数が変更出来ます。


稼動音が大変静かで、場所をとらない軽量、小型タイプです。

- 麻酔ガス用ポートも装備されています。

仕 様

MAIN UNIT	
BPM 設定範囲	10-400 breaths/min
呼気比率設定範囲	20-80%
消費電力	100VAC (50/60Hz) 20W
本体外形寸法	コントローラ : W125 x D160 x H95mm バルブユニット: W155 x D295 x H130mm (マウス用) W155 x D295 x H130mm (ラット用) W155 x D295 x H180mm (ウサギ用)
重 量	コントローラ : 2kg バルブユニット: 1kg (マウス用)、1kg (ラット用)、3.4kg (ウサギ用)

チュービングアセンブリ

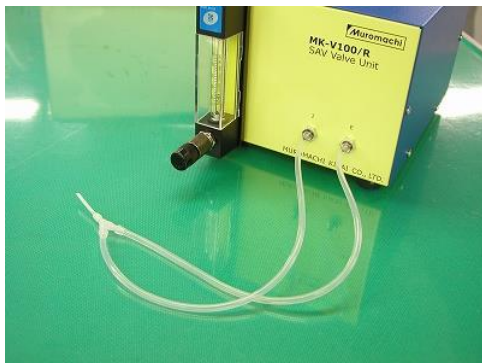

MK-V100/A アドオンユニット



標 準 装 備	
MK-V100 本体	1
バルブユニット (MK-V100R ラット又は MK-V100M マウス、又は MK-V100RB ウサギ)	1
チュービングアセンブリ	1

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社 : 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所 : 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所 : 〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーナ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail : sales@muromachi.com URL https://www.muromachi.com/

販売代理店