

ローコスト版小動物用麻酔器 MODEL MK-A100W

SMALL ANIMAL ANESTHETIZER



主な特長


- 小動物の麻酔に適した0.5~5%の麻酔混合気を安定して供給することができ、操作が容易、かつ日常の実験処理から長時間の手術まで広い範囲に応用可能です。
- 別売の麻酔ガス分割器を使用することにより、複数の動物に麻酔をかける事ができます。
- 卓上型・コンパクトサイズで、従来の麻酔器に比べさらに持ち運びが容易です。
- 0.5L/minの流量から使用できます。
- 導入、覚醒がきわめて迅速で覚醒状態も良好です。
- 引火性がなく、エーテル麻酔に比べて安全です。
- 麻酔深度の調節が容易です。
- ガスボンベが無くとも、麻酔をかけられます。
- 麻酔薬充填時の誤注入や、薬液こぼしを防止する為、専用アダプタが付属したキーフィルタータイプです。

仕様			
流量	0.5 ~ 5 L/min	外寸	W170 × D210 × H370 mm
濃度	0 ~ 5%	重量	7.5 kg
充填容量	140ml (最大量)	電源	100VAC 20W

標準構成	
本体	1
気化器 (1個選択) *キーフィルターアダプタ付	1
シリコンマウスピース (ラットかマウス)	任意の1個
接続チューブ・コネクタ	1式

気化器 (任意の1個)
イソフルレン気化器
セボフルレン気化器

オプション (別売)

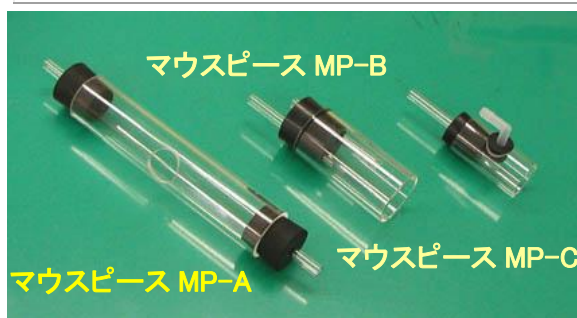

マウスピース (MP-A、B、C)	MP-A は動物の顔に対し、横置きでガスを吸わせませす。 MP-B(または C)は動物の顔に対し、縦置きでガスを吸わせませす。
エアタイトボックス MK-TB1 麻酔箱(ミニ) MK-ICXS 麻酔箱(スモール) MK-ICS 麻酔箱(ミドル) MK-ICM 麻酔箱(ラージ) MK-ICL	ボックスに入れたまま麻酔をかけられます。 約 28×28×H20cm 約 16×10×H10cm (チューブ部分含まず) 約 25×10×H10cm (チューブ部分含まず) 約 25×15×H20cm (チューブ部分含まず) 約 25×20×H20cm (チューブ部分含まず) <i>*上記以外特注サイズはご相談下さい。</i>
麻酔ガス 8 分割器	1 つのポートから最大 8 ポートまで分岐可能です。
余剰麻酔ガス回収装置	室外排気ができないときに使用します。
酸素用フローメータ	酸素を混合する場合に必要になります。 <i>*他種類のガス用流量計も御座います。</i>
麻酔ガス検知器	麻酔ガス回収フィルタ交換時期を知らせませす。

外観及び仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD. 室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL: 03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オバル新大阪ビル TEL: 06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL: 092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店