

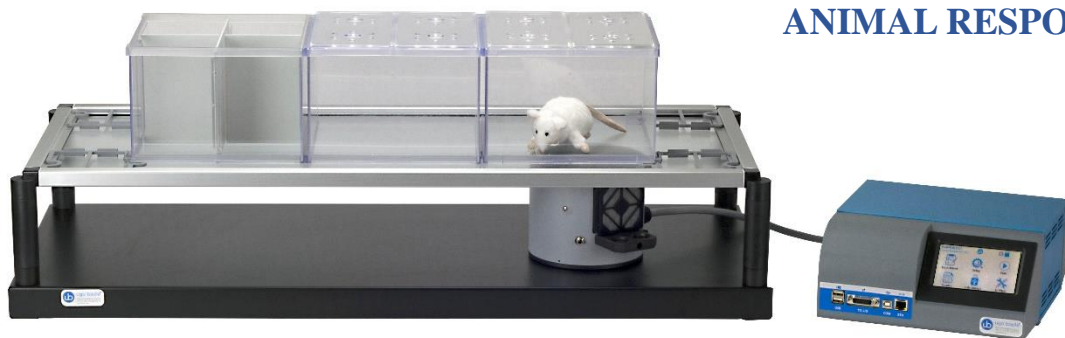
Ugo Basile 社製

プランター式鎮痛効果測定装置

Plantar Test

Cat. No.37570

PAIN and INFLAMMATION

 AUTOMATIC
 MEASUREMENT OF THE
 ANIMAL RESPONSE


Main Features

- ◆ 動物の反応を自動判定
- ◆ USBメモリにデータ転送可能
- ◆ 付属のチャンバーは最大12匹のマウスまで使用可能

ラット・マウスを無拘束の状態で、熱刺激に対する痛覚過敏度を迅速に測定できます。

【製品構成】

- 1) コントロールユニット 2) 可動式赤外線光源 3) ガラスプレート
 4) 専用プラットフォーム 5) アニマルチャンバー(ラット用2chまたはマウス用4ch)

ラット・マウス用チャンバーは3匹用が用意されています。

ラットの後肢にIR光源から熱刺激を与え、反応時間をカウンタで自動測定します。

仕 様	
熱刺激	IR光源(ハロゲンランプ)
LCD表示	反応時間：3桁, 0.1秒単位, IR強度：2桁
外形寸法	W850 × D350 × H400mm
電 源	100-240VAC 50/60Hz 50W

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
 室 町 機 械 株 式 会 社

販売代理店

本 社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail: sales@muromachi.com URL: https://www.muromachi.com/