


Ultra Precise Stereotaxic Instrument

Stoelting 社製 ラット用超精密ステレオタキシク
Model 51600U

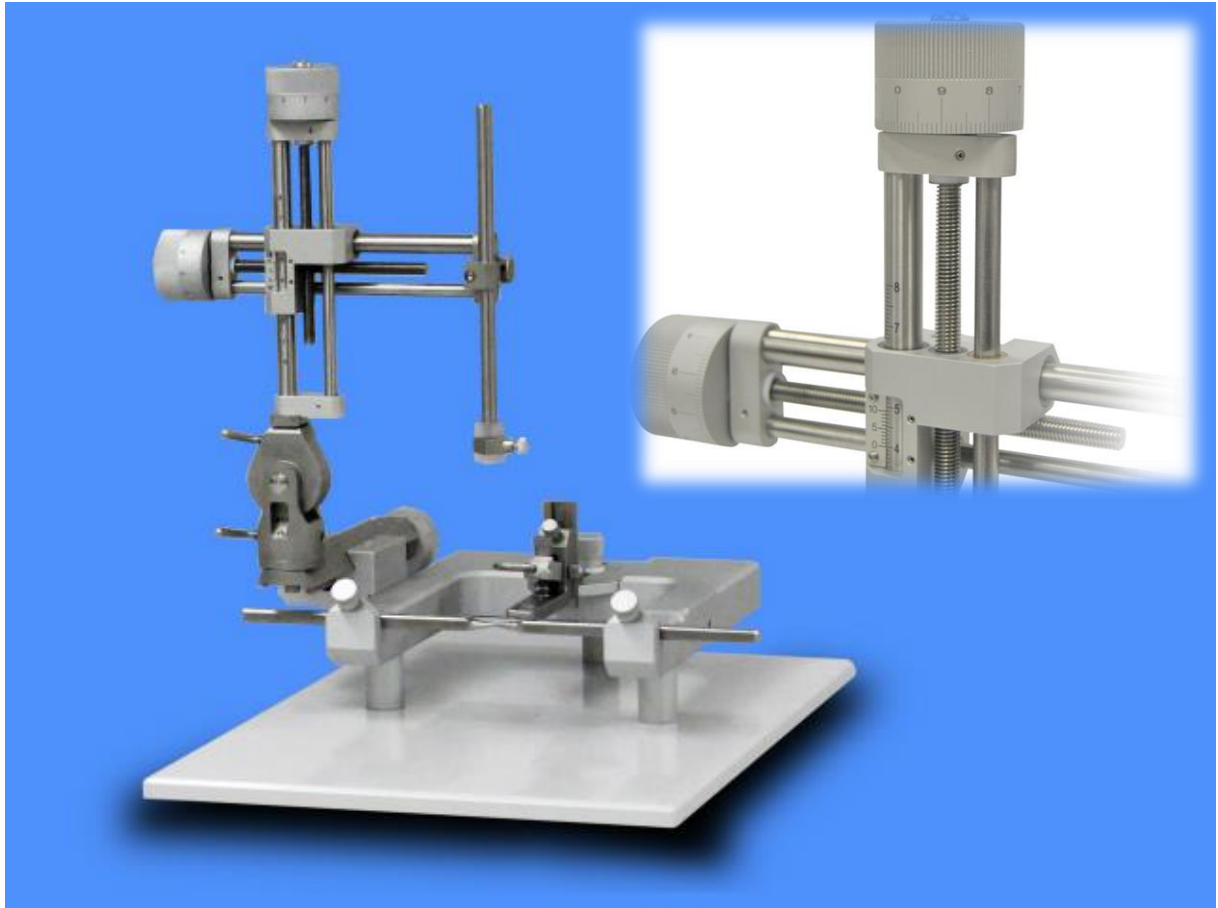

超精密ステレオタキシクは通常のエレクトロードマニピュレータより微細の駆動が可能になったステレオタキシクです。また価格も**従来の超精密マニピュレータ**付のステレオタキシクより**安価な価格**を実現しました。高品質で使い易さを特長としており、最小で $10\mu\text{m}$ の稼働ができますので微細なインジェクションを行う場合に最適です。

また、超精密エレクトロードマニピュレータのみを購入し、今お使いの Stoelting 社のステレオタキシク Lab Standard , Just for Mouse , New Standard , Just for Mice に取り付けることや、アームをもう一本取り付けることも可能です。

主な特長

- 10 μ m 単位の微細な稼働が可能。
- イアバーとツースバーの高さが調整できます。
- オプションのマウスアダプタ MA-625 を使用すれば、マウス用としても使用できます。
- 豊富なアクセサリが用意されています。
 - Brain Infusion 用ステレオタキシック・インジェクタ
 - ALZET 浸透圧ポンプ用カニューラホルダ
 - ステレオタキシック・ドリル
 - ガス麻酔マスク
 - ステレオタキシック用体温コントロール・システム
- セカンドマニピュレータ(オプション)を取り付けることもできます。

仕 様	
材質	ベースプレート:アルミ合金 その他の部分:ステンレススチール
寸法	ベースプレート: W255 x D350mm
重量	約 7kg

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社 : 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所 : 〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所 : 〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail : sales@muromachi.com URL : <https://www.muromachi.com/>

販売代理店