


# 麻醉ガスマルチチャンネルステーション

## MK-MGD8N-Tray

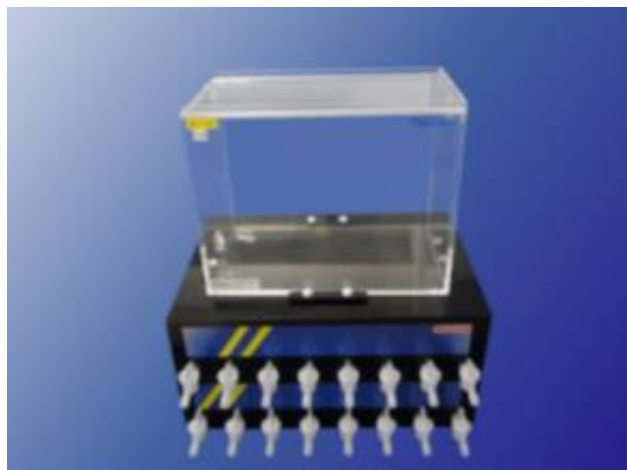

\*麻醉箱は別売りです。

麻醉ガスマルチチャンネルステーションは、1台の麻醉器と接続することにより、麻醉ガスを均等に複数分割して供給・回収することが可能です。  
煩雑だったチューブの配管もすっきりと納めることが出来、省スペース化を実現しました。

使用しているポートが均等になる様、各ポート間の流量ムラを抑えた仕様になっており、安定して麻醉ガスを供給することが出来ます。  
麻醉箱(オプション)を箱の上部に置くことが出来ますので、作業スペースを有効利用できます。

麻醉ガス供給ポート最大8chまで、麻醉ガス排気ポート最大8chまで使用可能です。  
強制排気機能は、別売の麻醉ガス回収器を接続することで可能になります。

仕様	
外形寸法	W320 × D230 × H155mm (ポート部含まず)
重量	約3 kg
ポート(ch数)	供給・回収 各8ch

\*マウスピースは別売りとなります。

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.  
室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444  
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オハル新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750  
E-mail: sales@muromachi.com URL: <http://www.muromachi.com/>

販売代理店