

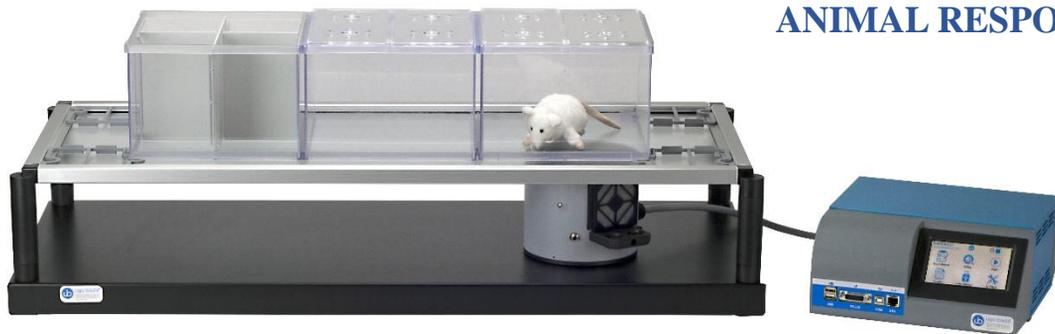
Ugo Basile 社製

## プランター式鎮痛効果測定装置

Plantar Test

Cat. No.37570

PAIN and INFLAMMATION

 AUTOMATIC  
 MEASUREMENT OF THE  
 ANIMAL RESPONSE


## Main Features

- ◆ 動物の反応を自動判定
- ◆ USBメモリにデータ転送可能
- ◆ 付属のチャンバーは最大12匹のマウスまで使用可能

ラット・マウスを無拘束の状態で、熱刺激に対する痛覚過敏度を迅速に測定できます。

## 【製品構成】

- 1) コントロールユニット    2) 可動式赤外線光源    3) ガラスプレート  
 4) 専用プラットフォーム    5) アニマルチャンバー

アニマルチャンバーはラット3匹または・マウス12匹に対応できます。  
 動物の後肢にIR光源から熱刺激を与え、反応時間をカウンタで自動測定します。

仕 様	
熱刺激	IR光源(ハロゲンランプ)
LCD表示	反応時間：3桁, 0.1秒単位, IR強度：2桁
外形寸法	W850 × D350 × H400mm
電 源	100-240VAC 50/60Hz 50W

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.  
 室 町 機 械 株 式 会 社

販売代理店