

■ヒーティング・オプション

●Rodent Warmer X1 型式:53800

1ch コントローラ



- ダイヤル式コントロールで簡単に設定可能
- 直腸温プローブ(オプション)が使用可能
- 小型・軽量

●Rodent Warmer X2 型式:53850

2ch コントローラ




- 2台の装置を別々に設定・制御が可能
- タッチパネルで簡単に操作可能
- 直腸温プローブ(オプション)が使用可能



室町機械ステレオタキシク及びStoelting社ステレオタキシク等のヒーティングパッド内蔵型のステレオタキシクで使用可能です。

Temperature Control Range	25-45°C
Temperature Resolution	0.1°C

●小動物体温コントローラシステム 型式:FHC-HPS

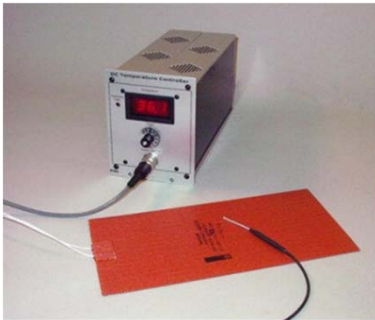

小動物の直腸温をモニタし、温度コントローラにフィードバックを行い、ヒーティングパッドにより動物の体温を予め設定した温度に保持できるように設計されています。

麻酔下における小動物の体温低下を防ぎ、適切な体温で長時間の実験を行うことができます。

D.C.電源による比例制御を行っていますので電気生理実験においてもノイズが発生しません。

■ステレオタキシク・インジェクタ

●ステレオタキシク・インジェクタ 型式:Legato130



注入と吸引の両方に使用できるタッチパネル式のインジェクタです。脳内投与等の薬液のインジェクションに最適です。

仕様	
シリンジサイズ	0.5 ~ 1000 ul
流速	最少(0.5ul syringe): 3.66 pl/min 最大(1000ul syringe): 3.818 ml/min

●ステレオタキシク用マニュアルインジェクタ 型式: SIM-155



ハミルトンシリンジの700, 7000, ガスタイト・シリーズ (1-100ulのシリンジサイズ)が使用できます。注入と吸引の両方に使用できます。ノブを1回転させるとシリンジのプランジャは0.5 mm進みます。

■ガス麻酔オプション

●オールインワン小動物用麻酔器 型式: MK-AT210D



小動物(ラット、マウス等)の麻酔時に必要な、麻酔器、余剰麻酔ガス回収装置を一体型にしたモデルです。ドラフト装置のようなガス回収設備が無くても安全にご使用いただくことができます。

仕 様			
流量	0.5 ~ 5 L/min (麻酔器・回収器共に)	外寸	W235 × D330 × H310mm
濃度	0 ~ 5%	重量	11 kg
充填容量	250ml (最大量)	電源	100VAC 15W

●ガス麻酔マスク



【マウス用ガス麻酔マスク】
型式: 51609M



【ラット用ガス麻酔マスク】
型式: GAM-R/MK

ステレオタキシクでのガス麻酔を使用する際に必要となります。

■ステレオタキシク・ドリル

●ハイスピード・ステレオタキシクドリル 型式: HSD-1000



ステレオタキシクに接続して使用することが可能です。
スピードはダイヤル又はフットスイッチにより自在にコントロールできます。

回転数は0-38,000 rpmで時計回り、反時計回りのどちらでも使用できます。

ドリルホルダ、ドリルバーセット付属

(室町機械、Stoelting社ステレオタキシク使用可能)

* Head diameter 0.2, 0.5, 0.7, 0.79, 1.0, 2.1, 2.35mmのBall Barが付属

構成					
コントローラ	1	ハンドピース	1	ドリルバーセット	1
ドリルホルダ	1	フットスイッチ	1		

●コードレス・マイクロドリル 型式: CMD-1000A



コードレスでリチャージャブル(6Vニッケルカドミウム電池)のリサーチ用マイクロドリルです。

5種類のスティールバーが標準装備されており、持ち運びに便利なハードプラスチック・ケースが付属しています。

* Head diameter 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6のBall Barが付属します。

●ポータブル・ドリル 型式: PD-1000



充電式ポータブルタイプのマイクロドリルです。

回転数は0-30,000 rpmで調整可能です。(デジタル表示)

充電3時間で約5時間の稼働が可能

オプションのドリルホルダを使用すれば、ステレオタキシクに取り付けて使用することも可能です。

* Head diameter 0.2, 0.5, 0.7, 0.79, 1.0, 2.1, 2.35mmのBall Barが付属します。

■その他アクセサリ

●【ALZET用】カニューラ・ホルダ


型式： ALZ-240



ALZET浸透圧ポンプで使用するブレインインフュージョンキットを本製品で保持することができます。

他社のステレオタキシクでも使用可能です。(一部製品を除く)

● ネオネイタルラット&マウスアダプタ 型式： MA-625

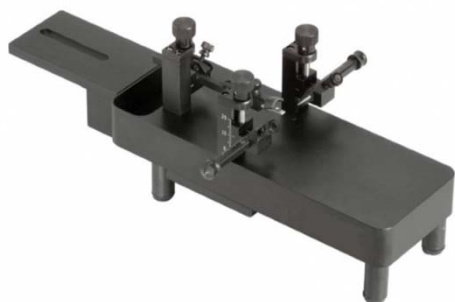

ステレオタキシクIMPACT-1000C用のネオネイタルラット及びマウス用アダプタです。

ステレオタキシクにセットするだけで簡単に使用する事が可能です。

イアバーには、ラバーキャップの他にJaw holderが付属しておりますので、用途に合わせた固定が可能です。

● ステレオタキシク・LEDライト

型式： 59290



10インチフレキシブルアームに超高輝度LEDを搭載し、独自のマグネットベース/パックシステムにより、非金属面にも取り付けることができますので、使用環境を選ばず使用することが可能です。

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

本社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277

E-mail: sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店